


铰链钛板


• 铰链钛板适用于门轴断裂塌陷或错位,可防止椎板错位造成神经根或硬脊膜损伤

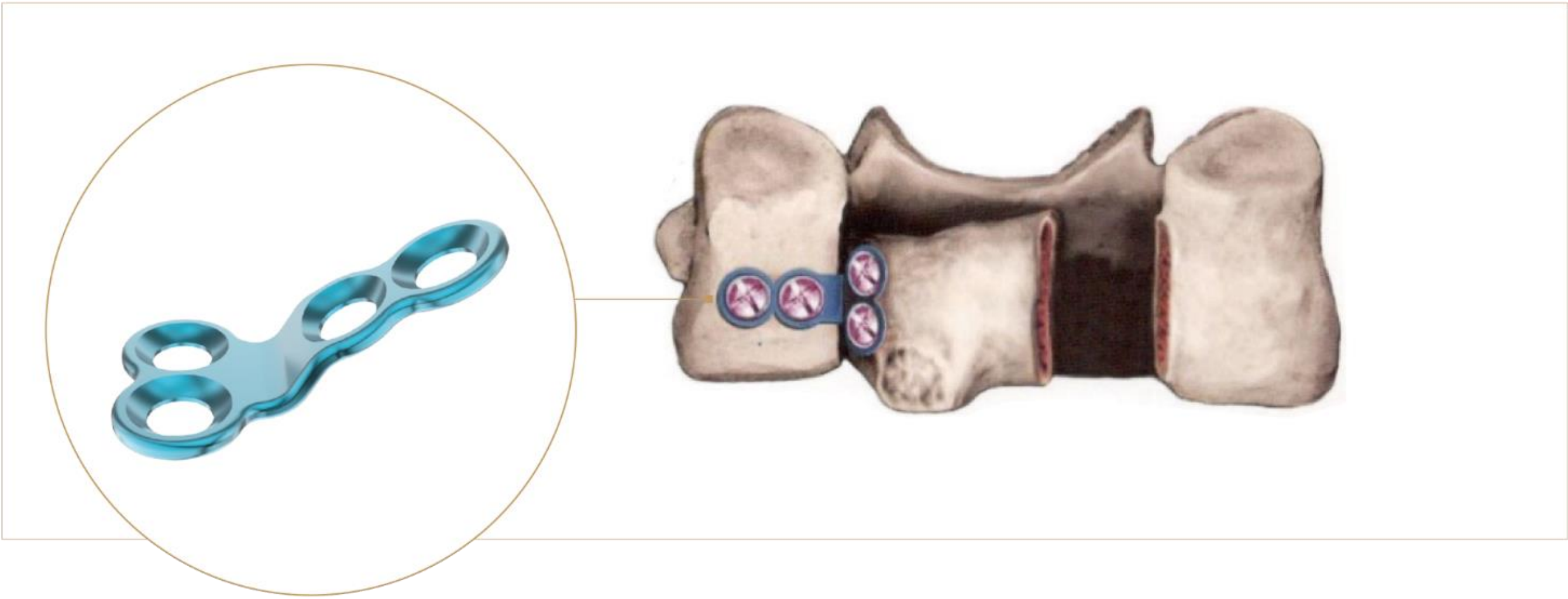

螺钉

螺钉采用自攻螺钉,螺钉直径 2.0mm、2.5mm 和 3.0mm, 长度 5-11mm,每递增 2mm 为一个规格

型号	直径(mm)	产品编号	长度 (mm)
AHD-I	2.0	108040102005-2011	5~11
AHD-II	2.5	108040202605 -2611	5~11
AHD-III	3.0	108040303005 -3011	5~11

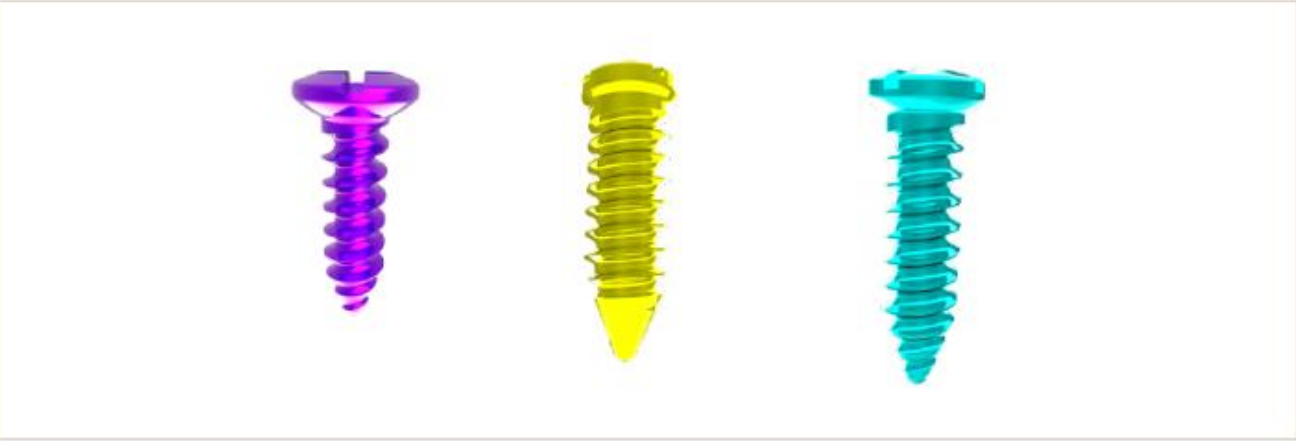

浙江德康医疗器械有限公司
ZHEJIANG DECANS MEDICAL DEVICES CO., LTD

📍 浙江省嘉兴市秀洲区加创路321号上海交大(嘉兴)科技园7-8号楼
☎ 0573-82792526 📠 0573-82792536-8088 🌐 www.decansmd.com



AQUA颈后路椎板成型系统
AQUA POSTERIOR CERVICAL LAMINOPLASTY SYSTEM

适用于下颈椎至上胸椎的椎管扩大减压术后椎板成形



AQUA颈后路椎板成型系统

AQUA POSTERIOR CERVICAL LAMINOPLASTY SYSTEM

AQUA颈椎后路椎板成形钛板系统通过多样化的设计、以及人性化的工具设计，提供了一套完整且多样化的解决方案。





适应症：

- 用于颈椎疾病后路椎管成型术后固定
- 发育性颈椎管狭窄
- 多节段颈椎病伴/不伴有颈椎管狭窄
- 多节段后纵韧带骨化症
- 颈椎前路手术效果不佳，需后路补充减压

系统特点：

- 多样化的设计适合不同的个体解剖及医生选择
- 钛板预弯、预裁设计，固定简单
- 多螺钉孔设计，使植入时更灵活
- 钛板彩色标识清楚易区分
- U型卡口设计，保持椎板开放，便于植入，降低风险

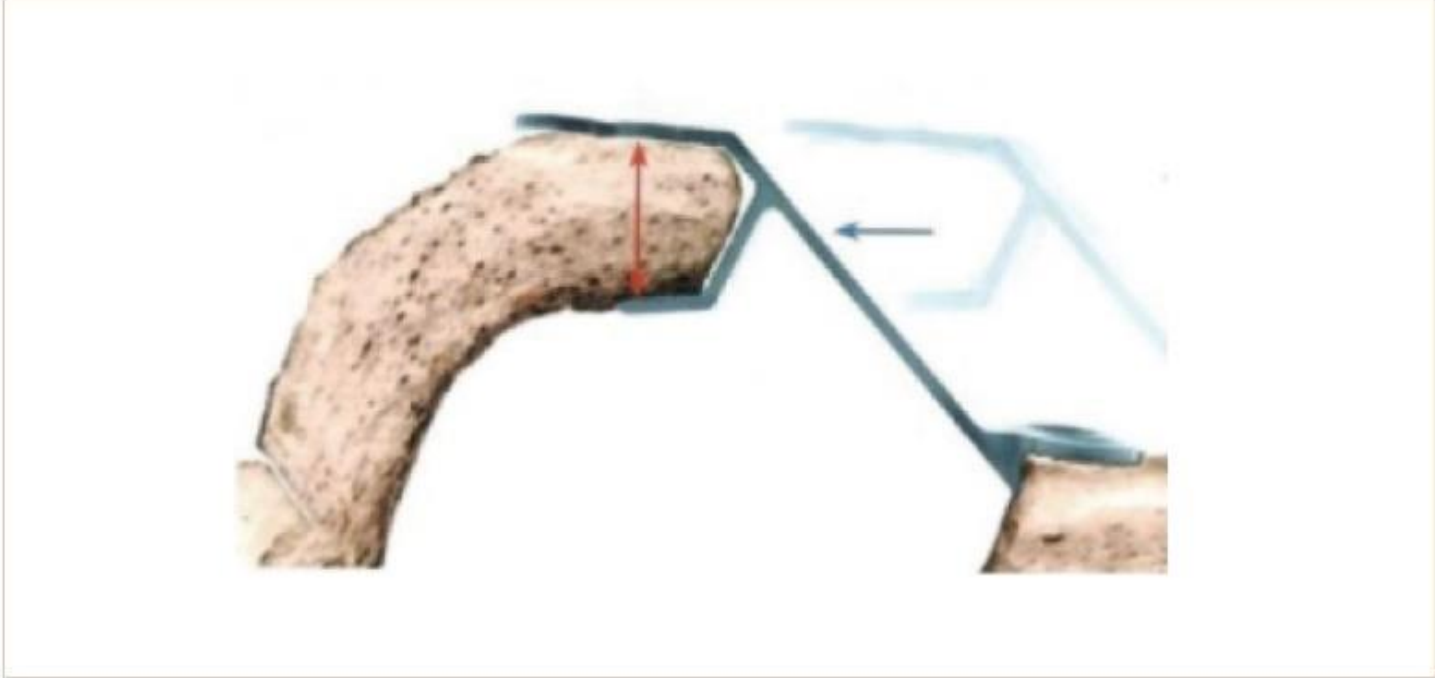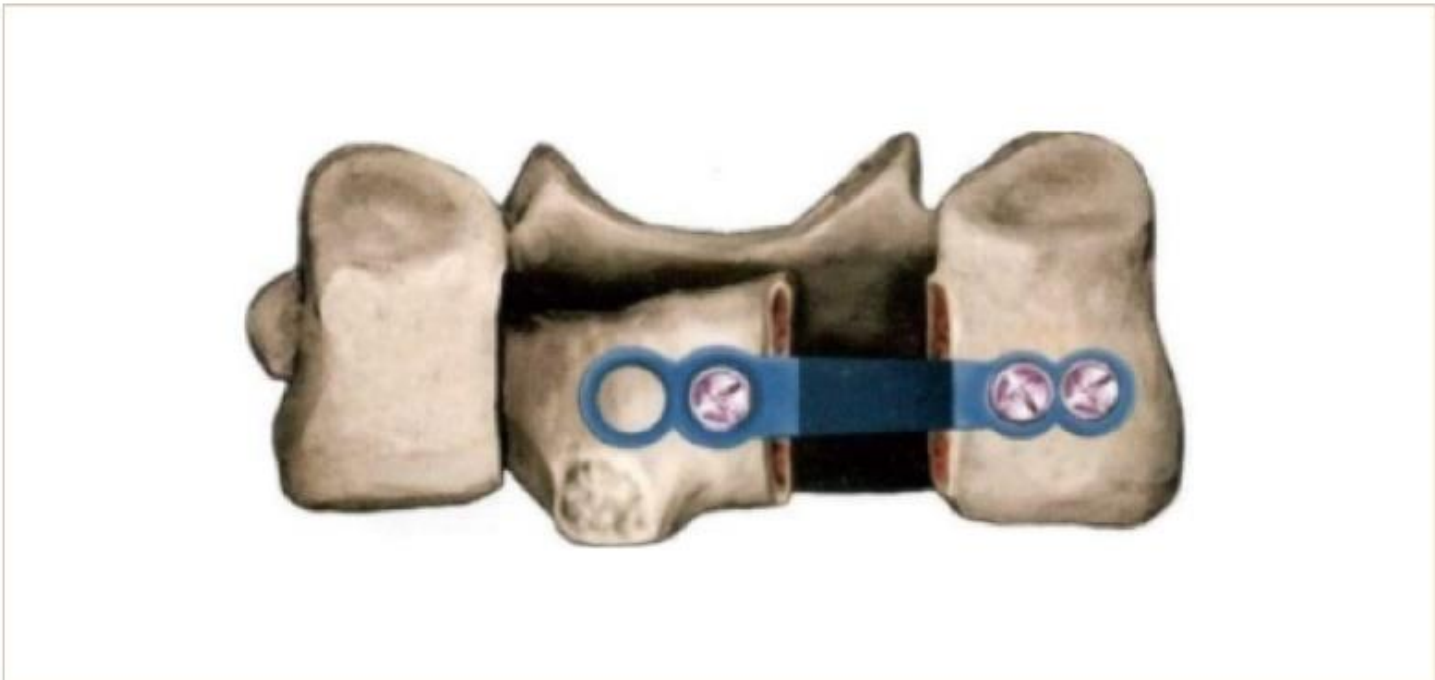

开门钛板 (4款)

- 椎板架式设计使钛板在侧块固定时稳定牢固
- 侧块支撑脚架式设计使钛板在侧块固定时稳定牢固



植骨钛板 (8款)

- 钛板中间螺钉孔的椭圆形设计允许钛板与植入物做少许的调整
- 内 / 外侧方向的螺孔适用于侧块上下径减小时，尤其是同时行椎间孔切开时使螺钉植入更方便

